ASSISTENZA ECLS PERSONALIZZATA

Cannule Bio-Medicus Life Support™



PERTUTTA LA GAMMA DEI SUOI PAZIENTI.

La gamma di prodotti Bio-Medicus Life Support della linea di cannule ECLS è parte del nostro impegno costante nel campo del supporto extracorporeo delle funzioni vitali (ECLS).



Di pari passo con l'evoluzione e la diffusione della terapia ECLS aumenta anche la varietà di pazienti trattati. Ciò rende impegnativo fornire la migliore assistenza personalizzata a ogni paziente.

La gamma di cannule Bio-Medicus Life Support affronta molte di queste sfide.

Sviluppato in larga misura sui suggerimenti degli utenti, la cannula Bio-Medicus Life Support offre differenti lunghezze, dimensioni e configurazioni di qualsiasi altra marca consentendovi di soddisfare le vostre esigenze di personalizzazione del trattamento ECLS.

PROGETTATO PER PRESTAZIONI OTTIMALI

OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO

Il disegno sottile della parete, resistente alla piegatura, favorisce velocità di flusso ottimali.

FACILITÀ DI INSERIMENTO

Caratteristiche, come il basso profilo della punta della cannula sull'introduttore, consentono una transizione uniforme facilitando l'inserimento.

MATERIALE BIOSTABILE AVANZATO


Le cannule Bio-Medicus Life Support sono fabbricate con Elast-Eon,™ un copolimero poliuretano/silicone biostabile e biocompatibile. Elast-Eon è comunemente utilizzato in dispositivi medici impiantabili e per uso prolungato, comprese cannule a doppio lume per ECLS.




OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Abbiamo sviluppato le cannule Bio-Medicus Life Support prestando ascolto alle esigenze dei clinici impegnati nel campo dell'ECLS per quanto riguarda le tecniche e le configurazioni.

VENO-VENOSO

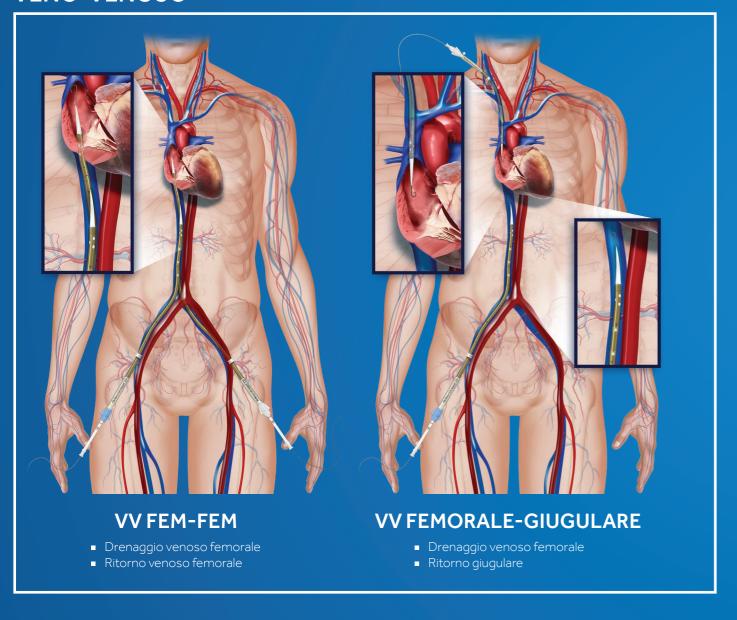

VENO-ARTERIOSO

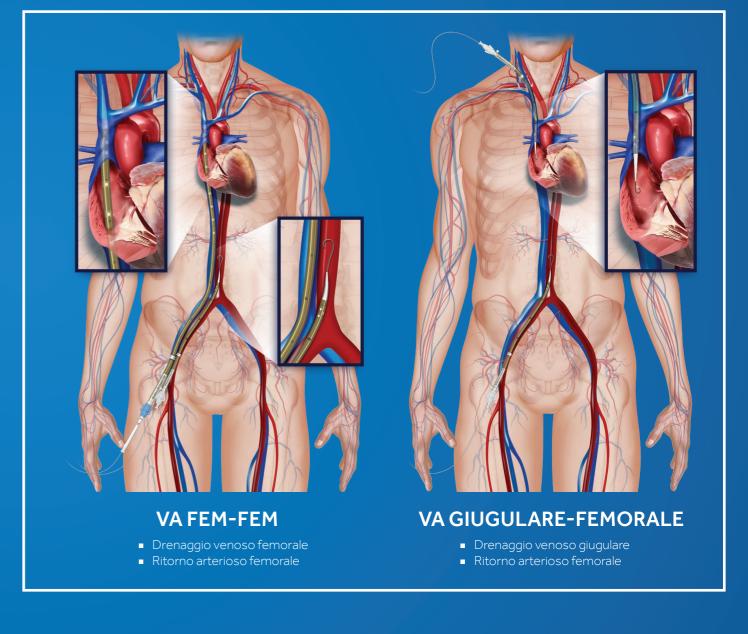

PIÙ DIMENSIONI. PIÙ LUNGHEZZE. PIÙ OPZIONI.


Bio-Medicus Life Support dispone di diverse opzioni di cannule offrendo la flessibilità che permette di somministrare un trattamento esclusivo a ciascun paziente, dai più esili ai più massicci, dai giovani agli anziani, con esigenze diverse di supporto extracorporeo.

- Dimensioni da 9 a 29 French
- Lunghezze di inserimento da 10 cm a 61 cm
- Configurazioni per ECMO o ECLS VA e VV

CANNULE DI DRENAGGIO O RITORNO - FLEX

Usate per configurazioni VA o VV Progettate per il drenaggio o il ritorno con diverse lunghezze di inserimento, fori laterali solo vicino alla punta Supporta il tracciamento con filo quida FLEX Fino a 18 cm di lunghezza di inserimento L'introduttore lungo Fori laterali vicino alla punta (Vedere **FIGURA A**, sotto, per i dati del flusso) affusolato facilita il nosizionamento Transizioni uniformi Marker di profondità Design con punta Per visualizzare la lunghezza di inserimento affusolata FLEX XL Lunghezza 50 o 55 cm per facilitare posizioni mirate nel vaso

Flex XL Catetere di drenaggio/ritorno da 50/55 cm L\$96550-, L\$96555-

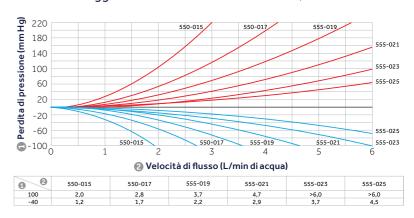

CANNULE DI DRENAGGIO - MULTI

Progettate per un drenaggio efficiente e una dinamica di flusso ottimale†

MULTI Lunghezza 38 cm per il drenaggio dalla vena cava inferiore

Introduttore lungo
Facilita l'inserimento

Marker indicatore
Indica che tutti i fori laterali sono stati inserimento diversi posizionamenti della punta per supportare il flusso di drenaggio


Marker indicatore
Indica che tutti i fori laterali sono stati inseriti nel vaso alla profondità minima

Fori laterali lisci
Facilità di inserimento e rimozione

61 cm

Multi e Multi XL

Catetere di drenaggio da 38/55/61 cm LS96438-, LS96355-, LS96360-

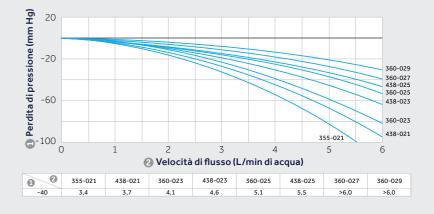


CATETERI DI DRENAGGIO O RITORNO - MINI

Per configurazioni di posizionamento del catetere che richiedono dimensioni inferiori e minori lunghezze di inserimento



sopra possono non esser indicativi delle prestazion cliniche

FIGURA A Flex e Mini Catetere di drenaggio/ritorno da 18/10-11,5 cm LS96010-, LS96110-, LS96218-

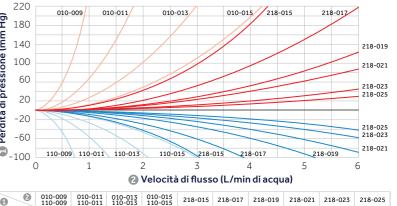

100 0,6 1,2 2,0 2,8 3,0 4,1 5,5 >6,0 >6,0 >6,0 -40 0,4 0,8 1,3 1,8 1,9 2,4 3,5 4,0 4,9 5,9

†Dati in archivio. I dati dei test da banco possono non essere indicativi dei risultati clinici

INFORMAZIONI PER ORDINARE

Cannule Bio-Medicus Life Support e introduttori	Codice cannule	French	Lunghezza della punta	Connettore
DRENAGGIO O RITORNO FLEX	LS96218-015	15 Fr (5,0 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
	LS96218-017	17 Fr (5,7 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
	LS96218-019	19 Fr (6,3 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
	LS96218-021	21 Fr (7,0 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
	LS96218-023	23 Fr (7,7 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
	LS96218-025	25 Fr (8,3 mm)	18 cm	3/8" (0,95 cm) Con Sfiato: Vented
DRENAGGIO O RITORNO FLEX XL	LS96550-015	15 Fr (5,0 mm)	50 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96550-017	17 Fr (5,7 mm)	50 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96555-019	19 Fr (6,3 mm)	55 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96555-021	21 Fr (7,0 mm)	55 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96555-023	23 Fr (7,7 mm)	55 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96555-025	25 Fr (8,3 mm)	55 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
DRENAGGIO MULTI	LS96438-021	21 Fr (7,0 mm)	38 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96438-023	23 Fr (7,7 mm)	38 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96438-025	25 Fr (8,3 mm)	38 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
DRENAGGIO MULTI XL	LS96355-021	21 Fr (7,0 mm)	55 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96360-023	23 Fr (7,7 mm)	61 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96360-025	25 Fr (8,3 mm)	61 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96360-027	27 Fr (9,0 mm)	61 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
	LS96360-029	29 Fr (9,7 mm)	61 cm	3/8" (0,95 cm) Senza Sfiato: Non-Vented
RITORNO MINI	LS96010-009	9 Fr (3,0 mm)	10 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96010-011	11 Fr (3,7 mm)	10,5 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96010-013	13 Fr (4,3 mm)	11 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96010-015	15 Fr (5,0 mm)	11,5 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
DRENAGGIO MINI	LS96110-009	9 Fr (3,0 mm)	10 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96110-011	11 Fr (3,7 mm)	10,5 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96110-013	13 Fr (4,3 mm)	11 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato
	LS96110-015	15 Fr (5,0 mm)	11,5 cm	1/4" (0,64 cm) senza sfiato

Informativa

Per informazioni dettagliate su istruzioni per l'uso, procedura di impianto, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare il manuale del dispositivo. Per maggiori informazioni contattare il rappresentante locale Medtronic e/o consultare il sito Web Medtronic all'indirizzo www.medtronic.eu.

Queste informazioni sono rivolte solo a utenti che operano nei mercati in cui i prodotti e le terapie Medtronic sono approvati o disponibili per l'uso, come indicato nei rispettivi manuali del prodotto. Il contenuto di specifici prodotti e terapie Medtronic non è destinato agli utenti di mercati che non dispongono dell'autorizzazione per l'uso.

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl. Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz www.medtronic.eu Tel. +41 (0)21 802 70 00 Fax +41 (0)21 802 79 00

Italia

Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina, 162 IT-20156 Milano (Mi) www.medtronic.it Tel. +39 02 24 13 71 Fax +39 02 24 13 81

Svizzera

Medtronic (Schweiz) AG Talstrasse 9 Postfach 449 CH-3053 Münchenbuchsee www.medtronic.ch Tel. +41 (0)31 868 01 00 Fax +41 (0)31 868 01 99

LifeLine

CardioVascular Technical Support rs.cstechsupport@medtronic.com

UC202102404IT © Medtronic 2020. Tutti i diritti riservati.